


オートインジェクター

Model SSC-1300

オートインジェクター SSC-1300は、同一試料を繰り返し注入する事ができます。また、リサイクル用電磁弁を備えている為、流路の切替を行う事ができます。よって、高回収率によるリサイクル(GPC)分取を可能としました。本装置は、再現性の高い繰り返し動作と試料の注入精度を有しています。

特長

- 最大10mlの試料を再現性よく、連続注入出来ます。
- 吸引用シリンジを交換することで、0.025~10mlまで対応出来ます。
- シリンジ容量(0.25、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0ml 6種類交換可)
- 注入量は、シリンジ容量別に10%単位で任意設定できます。
- リサイクル機能を使用することで、溶媒の消費量を削減できます。
- 運転中、圧力の増減を監視し異常時には装置を停止できます。

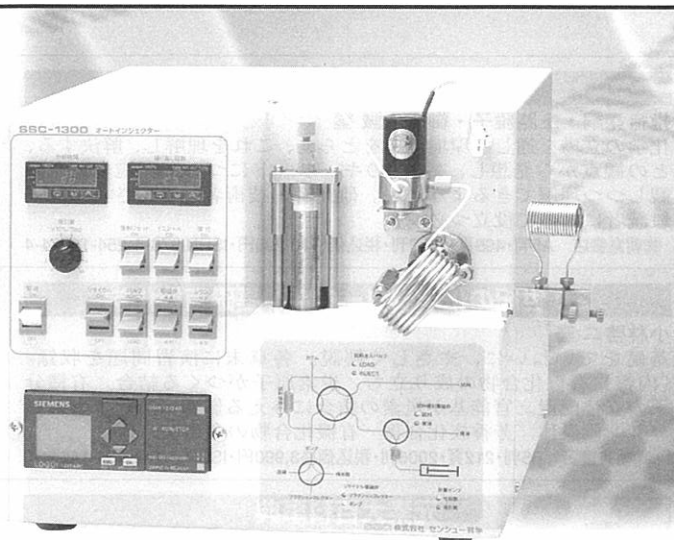

リサイクル始めませんか？


フラクションコレクター SSC-6800は、分画時間設定、検出器出力信号レベルなどの設定が可能で最大12分画できます。また、ドレイン用電磁弁を設けることでバルブ特有の切替時の圧力変動を抑えることを可能にした分取液体クロマトグラフ用フラクションコレクターです。

フラクションコレクター

Model SSC-6800

特長

- 分画時間設定は、等間隔時間設定とランダム時間設定が可能です。
- 検出器の出力信号強度に対応した分画が可能です。
- 自動洗浄機能により各分画ラインの洗浄が簡単にできます。
- ドレイン用電磁弁を装備し、圧力変動を抑えます。
- バルブ分画を採用する事で、完全密閉状態で分画採取ができ、環境に優しい。

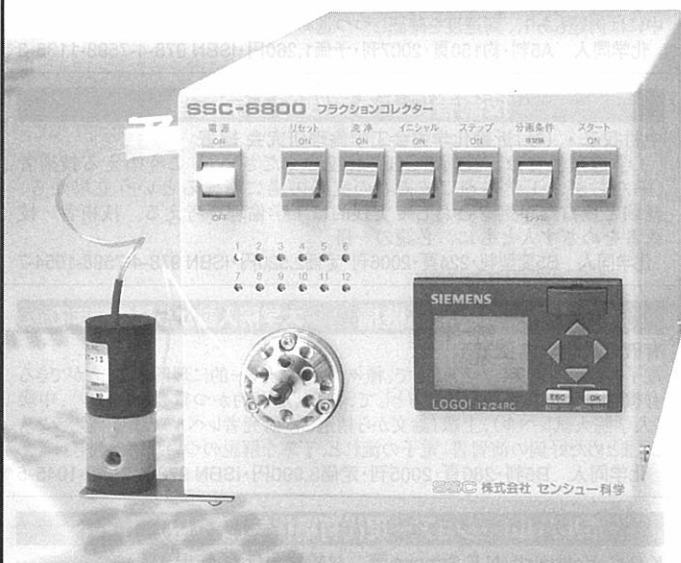

一歩進んだ仕事をしたい

SSC 株式会社 センシュウ科学

本 社 〒167-0021 東京都杉並区井草3-31-10 大和ビル
TEL (03) 3395-3251(代) FAX (03) 3395-3268
E-mail:tokyo@ssc-jp.com http://www.ssc-jp.com/
筑波営業所 TEL (0298) 55-6148